


Fiche : le GBF « Générateur Basse Fréquence »

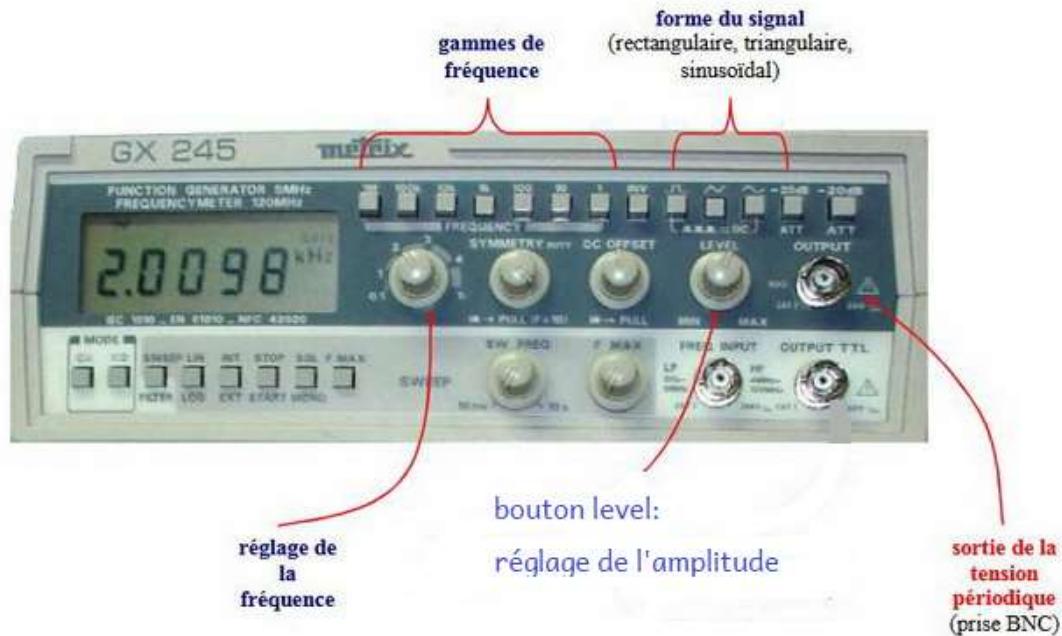

Vérifier que :

- "-20dB" en position relâchée,
- les boutons rotatifs "SYMMETRY" et "DC OFFSET" sont enfoncés.

Procédure de mise en marche :

- commutateur marche - arrêt (au dos de l'appareil),
- choisir la forme de la tension,
- choisir la gamme de fréquence,
- régler la fréquence,
- régler l'amplitude de la tension (à contrôler à l'oscilloscope).

Autres touches : ne pas utiliser (fonctions avancées du GBF).

Schéma d'un GBF en signal alternatif :

